


## LDBUSBTTL コンバータ

LDBUSBTTL コンバータは、USB 接続した PC からの命令で、TTL 信号を出力できるコンバータです。TTL 信号でオンオフするシャッター、LED 照明の制御に使用できます。

- USB ケーブル、および USB-TTL コンバータで構成、TTL 出力は BNC コネクタ（メス）
- 出力 0V/5V
- 給電は USB ケーブル（電源ケーブル不要）
- 主要画像処理ソフトで制御可能  
（ソフト上では、プライアー社製 ProScanIII コントローラの“シャッター”として認識します）
- LDBUSBTTL コンバータは、以下の製品に対応しております：
  - プライアー社製 明視野 LED 照明 LDB104 シリーズ
  - プライアー社製 メタルハライド照明 Lumen200S
  - サードパーティ製光源、シャッター（TTL 制御）

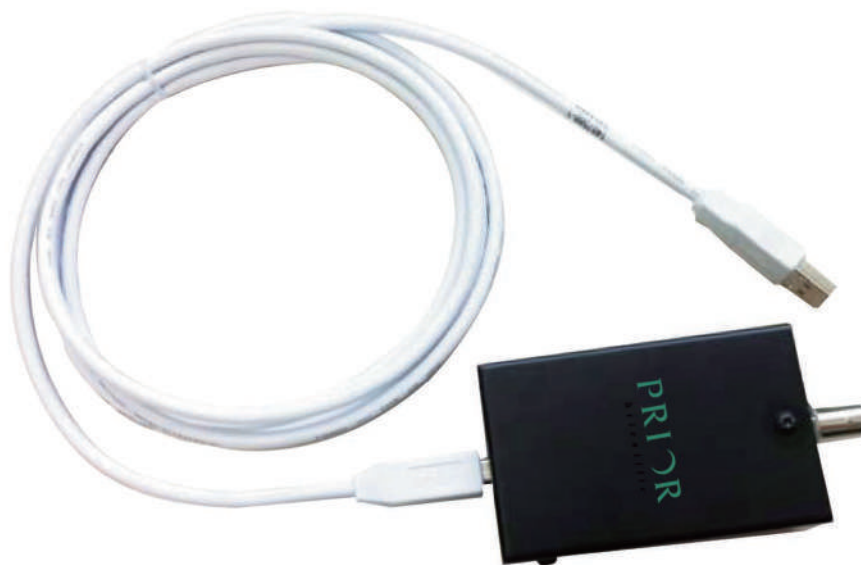

LDBUSBTTL コンバータ：¥68,000 円（税抜定価）

## LDBUSBTTL コンバータ

LDBUSBTTL コンバータ 同梱品



LDBUSBTTL 本体	1 個
USB ケーブル	1 本
BNC ケーブル	1 本

LDBUSBTTL コンバータ 接続図  
(構成: LDB104 + LDBUSBTTL)



お手持ちの PC へ  
USB で接続

プライアー・サイエンティフィック株式会社

103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10  
茅場町第三長岡ビル 10F  
電話: 03-5652-8831  
電子メール: info-japan@prior.com  
http://www.priorjp.co.jp