

3軸電動ブリッジステージ

H189 XYZ DECK



主な特長


- サンプル高さ調整79.5~410mm、Zリフト容量 (持ち上げ能力) 25kg
- XY動作範囲50x50mm、XY耐荷重100kg
- 取り外し可能なブレードボードを自由に組み合わせ、動物のin vivo、スライド、ディッシュなど多様な観察、マニピュレータやプローブ等を搭載しての実験が可能
- プライアーProScanIIIコントローラからの制御、世界の主要ソフトウェアに対応
- H31XYZEF ProScanIIIコントローラ、CS200XYジョイスティックユニット、CS200Zデジポット、H473UPユニバーサルホルダー、その他ケーブル類同梱
- 税抜定価： 5,900,000円

プライアー・サイエンティフィック株式会社


103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-7-10 茅場町第三長岡ビル 10F
03-5652-8831 | info-japan@prior.com | <http://www.priorjp.co.jp>

3軸電動ブリッジステージ

H189 XYZ DECK

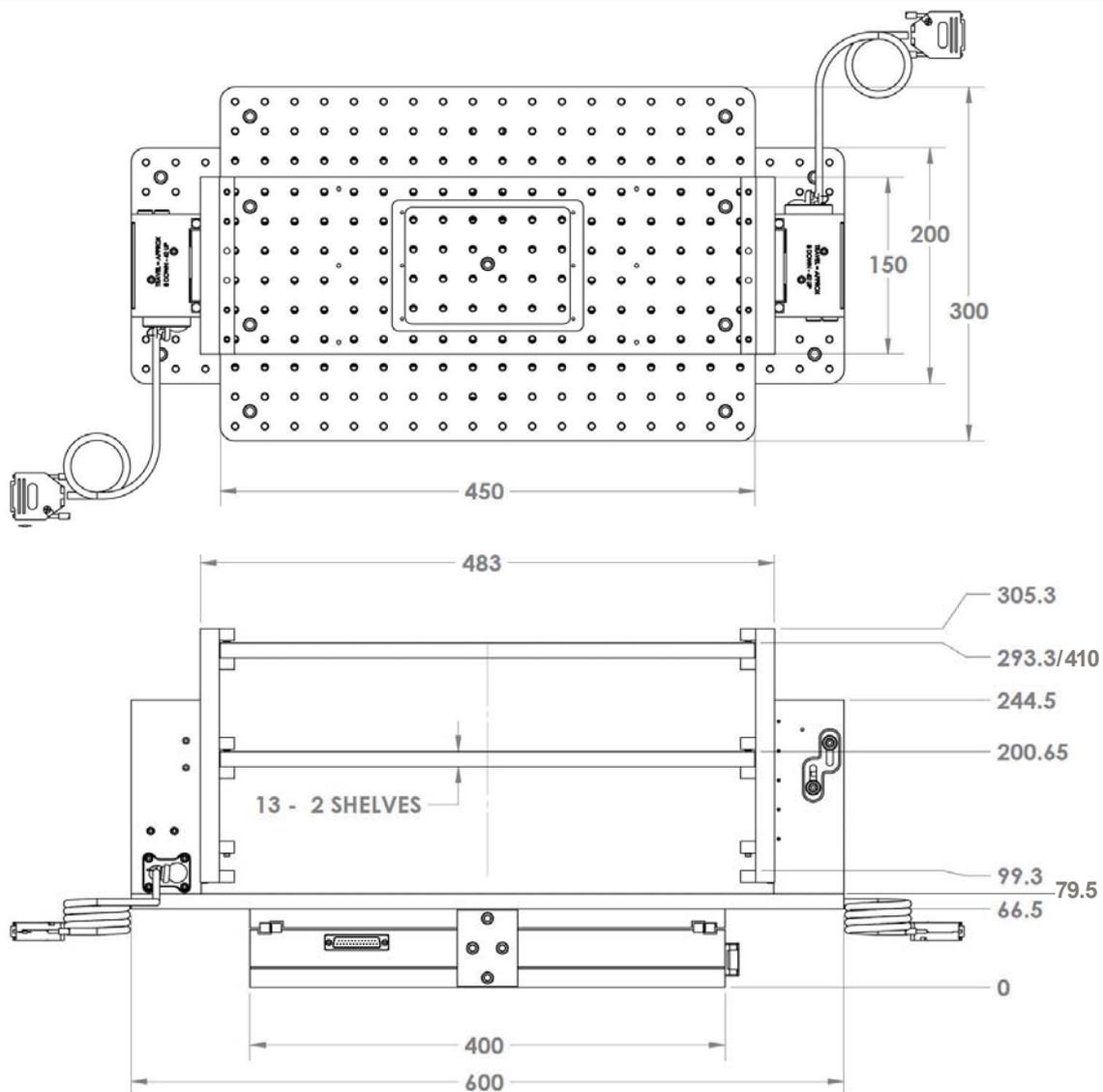

X軸動作範囲: $\pm 25\text{mm}$

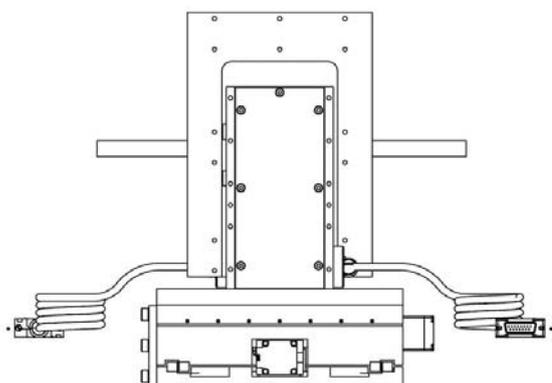

Y軸動作範囲: $\pm 25\text{mm}$

*サンプル最大高さ410mm
柱部分は図より75mm高く設置することができ、Zは上方向に42mm、下方向に8mm稼働します。